



# SCHAAL UW TESTEN OP COVID-19-ANTISTOFFEN OP

## MET HET PANBIO™ COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST DEVICE

MET BENODIGDHEDEN VOOR  
VINGERPRIK

### MAAK TESTEN BREDER BESCHIKBAAR


- Antistofonderzoek is belangrijk om te bevestigen dat infectie heeft plaatsgevonden
- Snelle opschaalmogelijkheden
- Tijd tot uitslag: 10–20 minuten
- Monstertypen omvatten vol bloed via vingerprik, veneus vol bloed of serum/plasma
- Handig voor teststraat, huisbezoek, point-of-care of laboratorium




# TESTPROCEDURE VINGERPRIK

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de volledige procedure.


## 1 PRIK IN DE VINGER MET EEN STERIEL LANCET

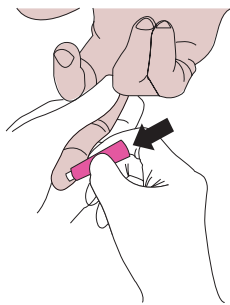

## 2 VOEG 20 µL VAN HET MONSTER TOE




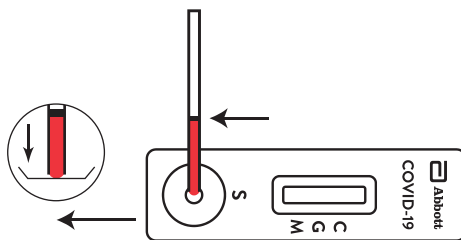


## 3 VOEG 2 DRUPPELS BUFFER TOE

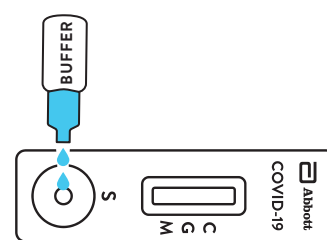

## 4 LEES HET RESULTAAT AF NA 10 MINUTEN

NA 20 MINUTEN NIET MEER AFLEZEN

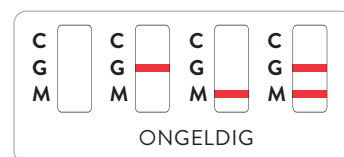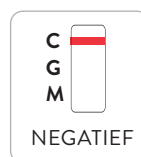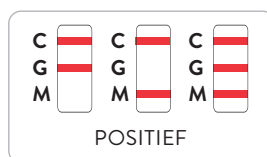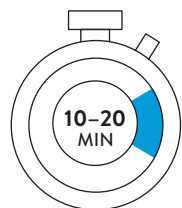

## BEOOGD GEBRUIK

Een *in vitro* diagnostische snelttest voor kwalitatieve detectie van IgG- en IgM-antistoffen tegen SARS-CoV-2 in menselijk serum, plasma en vol bloed; veneus of via vingerprik. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Bedoeld voor gebruik als hulpmiddel bij de diagnose van SARS-CoV-2-infectie. Het product kan worden gebruikt in laboratoria en in elke andere omgeving die voldoet aan de vereisten zoals gespecificeerd in de gebruiksaanwijzing en de lokale regelgeving. De test levert voorlopige testresultaten. Negatieve resultaten sluiten een infectie met SARS-CoV-2 niet uit en kunnen niet worden gebruikt als enige uitgangspunt voor behandeling of andere besluitvorming. De test is niet bedoeld om te worden gebruikt als donor-screeningtest voor SARS-CoV-2.

## SPECIFICATIES

- **TESTDUUR:** 10–20 minuten
- **OPSLAGTEMPERATUUR:** 2 °C–30 °C
- **CE-MARKERING**
- **MONSTERTYPE:** Vol bloed via vingerprik, veneus vol bloed, serum/plasma
- **MONSTERGROOTTE:**
  - 20 µL vol bloed via vingerprik of venapunctie
  - 10 µL serum of plasma
- **GEVOELIGHEID EN SPECIFICITEIT:**
  - VOL BLOED VIA VINGERPRIK**  
Gevoeligheid: 96,2%  
Specificiteit: 100,0%
  - VENEUS VOL BLOED**  
Gevoeligheid: 96,0%  
Specificiteit: 95,8%
  - PLASMA**  
Gevoeligheid: 97,8%  
Specificiteit: 92,8%

## BESTELINFORMATIE

Panbio™ COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device (met benodigheden voor vingerprik)

- **CATALOGUSNUMMER:** ICO-T40203
- **AANTAL:** 25 tests/kit
- **INHOUD:** 25 Test Devices, 1 buffer (3 mL/flacon), 25 monsterdruppelaars (voor vol bloed via vingerprik), 25 lancetten (voor vol bloed via vingerprik), 25 pleisters, 26 alcoholdoekjes, 1 gebruiksaanwijzing, 1 beknopte handleiding (voor vol bloed via vingerprik)

**NEEM VANDAAG NOG CONTACT OP MET UW LOKALE VERTEGENWOORDIGER VOOR HET OPZETTEN VAN EEN SNEL NATIONAAL OPSCHALINGSPROGRAMMA.**

Dit product is niet in alle landen beschikbaar. Niet goedgekeurd voor verkoop in de Verenigde Staten.

[www.poc-covid.abbott](http://www.poc-covid.abbott)